





- Removes hydrocolloid on contact
- Helps remove tapes and bandages
- Quick drying – no residue

- Enlève les hydrocolloïdes au contact
- Aide à enlever les adhésifs et les bandages
- Séchage rapide – aucun résidu

HOW TO USE

Instantly removes hydrocolloid, dressing tapes and other adhesives without irritation. Flash dries in 15 seconds without leaving a residue which allows for immediate reapplication.

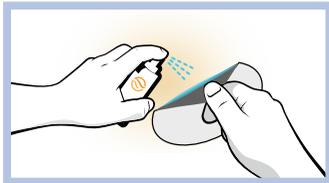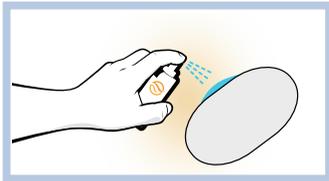

Hold foil packet vertically, tear at notch to open and remove cloth from packet. Keep cloth folded to retain maximum saturation.

! **Keep the packet held upright to avoid spilling the excess FreeDerm solution.**

Veillez tenir le paquet d'aluminium en position verticale, déchirez au niveau des encoches pour ouvrir et retirez le tissu du paquet. Gardez le tissu plié afin de conserver une saturation maximale.

! **Gardez le paquet bien droit afin d'éviter toute éclaboussure de solution excessive de FreeDerm.**


DIRECTIONS: For external use only on normal, intact skin. Spray edges of adhesive until wet. Gently lift the adhesive from the skin. While lifting, spray the exposed adhesive until completely released. If redness or irritation occurs, discontinue use and consult your healthcare professional.

INSTRUCTIONS: Pour utilisation externe uniquement sur une peau normale et intacte. Aspergez les extrémités de l'adhésif jusqu'à ce que ces dernières soient humidifiées. Enlevez délicatement les extrémités de l'adhésif de la peau. En les enlevant, aspergez l'adhésif exposé jusqu'à ce que ce dernier soit totalement libéré. En cas de rougeurs ou d'irritation, arrêtez l'utilisation et consultez un professionnel de la santé.




Drip the excess FreeDerm from the packet onto the top edge of the dressing, allowing the solution to drip downwards to start releasing the adhesive bond between the skin and dressing.

Aspergez quelques gouttes de solution FreeDerm en excès du paquet sur les extrémités supérieures du pansement, afin de permettre à la solution de s'écouler vers le bas afin de commencer à enlever le collage adhésif entre la peau et le pansement.

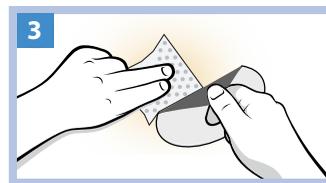

Once the dressing edge is lifted, use the folded cloth to wipe underneath the dressing as you gently pull the dressing off.

Une fois l'extrémité du pansement soulevée, utilisez le tissu plié pour essuyer sous le pansement, tout en enlevant délicatement le pansement.

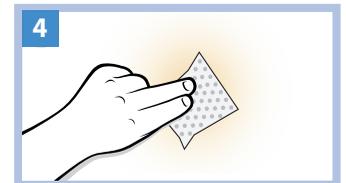

Once the dressing is completely removed, wipe the area to remove any residue adhesive.

Une fois que le pansement est complètement enlevé, essuyez les extrémités afin d'enlever tout résidu d'adhésif.

WARNING! Highly Flammable. Avoid contact with eyes and mouth. For external use only. Avoid inhalation.

AVERTISSEMENT! Extrêmement inflammable. Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Pour utilisation externe uniquement. Évitez l'inhalation.

INGREDIENTS: Siloxanes | INGRÉDIENTS: Siloxanes

Manufactured for: BioDerm, Inc. 12320 73rd Ct. North, Largo, FL 33773, USA
Support: (800) 864-6755 | CustomerCare@BioDermInc.com | www.BioDermInc.com
Fabriqué pour : BioDerm, Inc. 12320 73rd Ct. North, Largo, FL 33773, USA (États-Unis)
Assistance : (800) 864-6755 | CustomerCare@BioDermInc.com | www.BioDermInc.com

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
N'EST PAS FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE
CAOUTCHOUC NATUREL